


interchim




- **Extraction SPE sur Silices SampliQ :**
 - Greffons hydrophobes : C18EC, C18NEC, C8, C2, PH, ...
 - Greffons Hydrophiles : silice vierge, CN, Diol, NH2
 - Greffons Échange d'ions : SCX, SAX
 - Greffon Mixed Mode : C8/SCX
 - Adsorbants spécifiques : Florisil, Alumine A,B,N, Carbone Graphité
- **Extraction SPE sur Polymères SampliQ :**
 - Polymère Hydrophile / hydrophobe : OPT
 - Polymères hydrophobes : DVB, PS-DVB
 - Polymères Échange de cations forts & faibles : SCX, WCX
 - Polymères Échange d'anions forts & faibles : SAX, WAX
- **Extraction & Purification avec SampliQ QuEChERS**
 - Tubes d'extractions & de purifications remplis
 - Tubes d'extractions & de purifications avec barreaux homogénéisateurs inclus
 - Sachet d'extractions & de purifications en format individuel
 - Phases en vrac spécifiques
- **Filtration**
 - Filtres seringues Premium & Econofilter
 - Filtres sans seringue Mini-Uniprep Agilent
- **Appareils & accessoires pour la préparation d'échantillons**

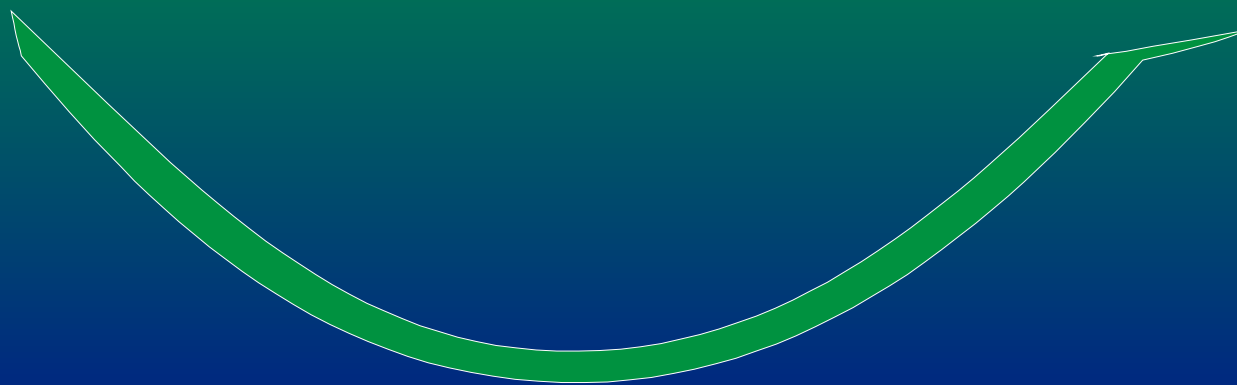

-
- Agilent SAMPLiQ 0.1
- Agilent SAMPLiQ SCK
- Agilent SAMPLiQ CB/SCK
- Agilent SAMPLiQ 1A
- Agilent SAMPLiQ PS-DVB
- Agilent SAMPLiQ CTB
- Agilent SAMPLiQ Amine
- Agilent SAMPLiQ C2
- Agilent SAMPLiQ Cyano
- Agilent SAMPLiQ Evidex
- Agilent SAMPLiQ Alumina A
- Agilent SAMPLiQ Silica
- Agilent SAMPLiQ Dried
- Agilent SAMPLiQ Alumina H




- Polymère sphérique
- Coupe granulométrique étroite
- Disponible en 30 μ m & 60 μ m
- Bonne résistance mécanique
- Package homogène
- Écoulement reproductible

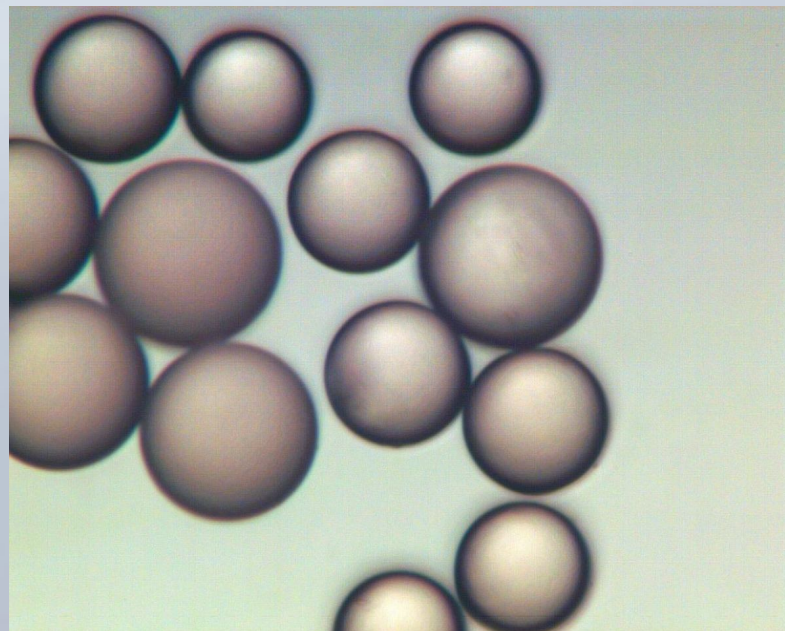




- Polymère sphérique 30 et 60 μm
- Interactions hydrophiles / lipophiles
- Bonne résistance mécanique
- Stable au pH de 0 à 14
- Extraction de composés acides, basiques, ou neutres ($\log P > 1.3$)
- Compatible avec tout les types de matrices

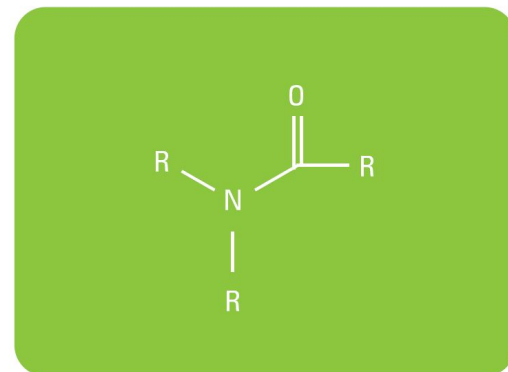

Polyamide chemistry




Waters' Method MeOH Elution Comparison 10ug

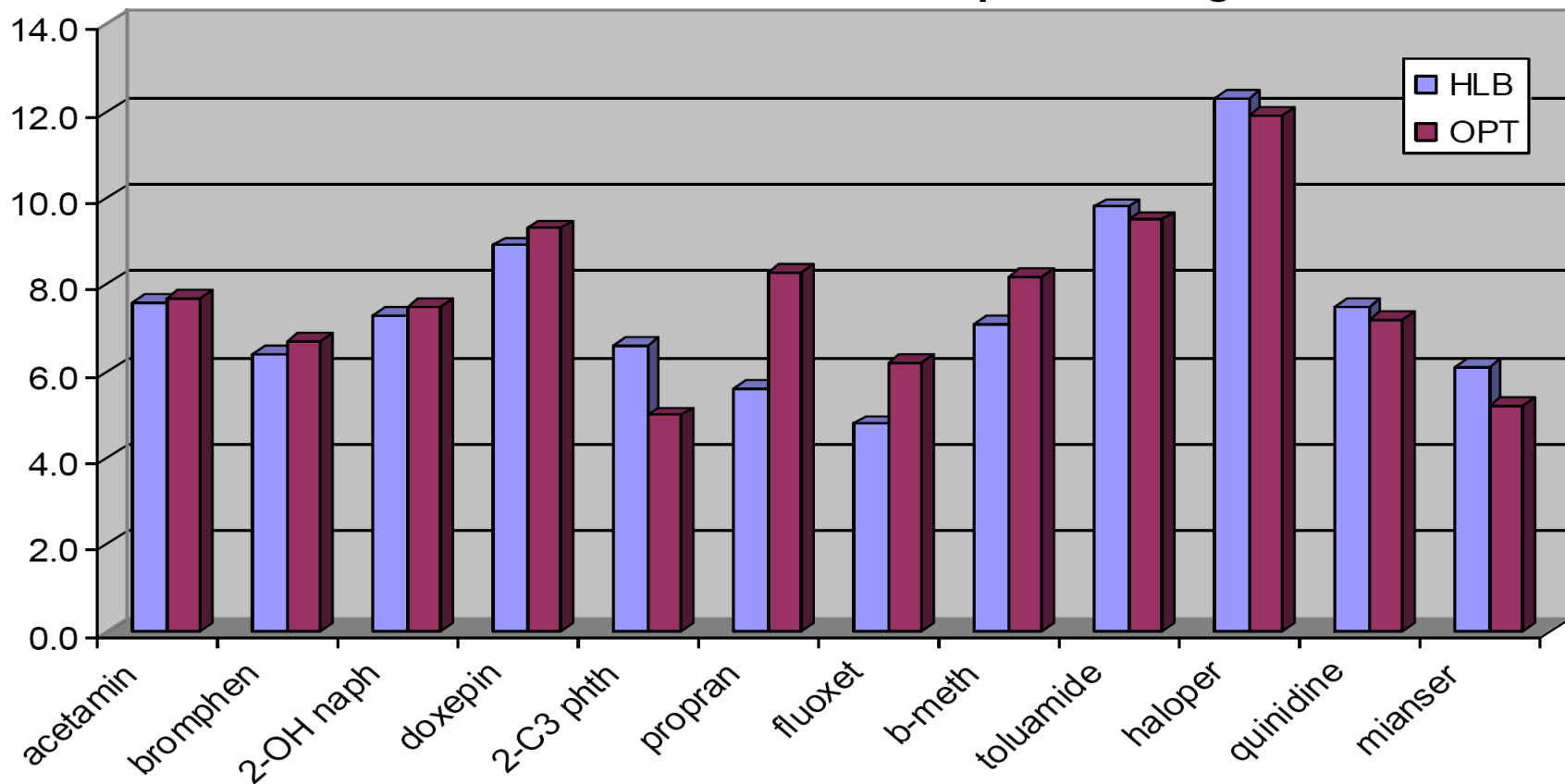




Resin Purity – OPT versus Oasis HLB

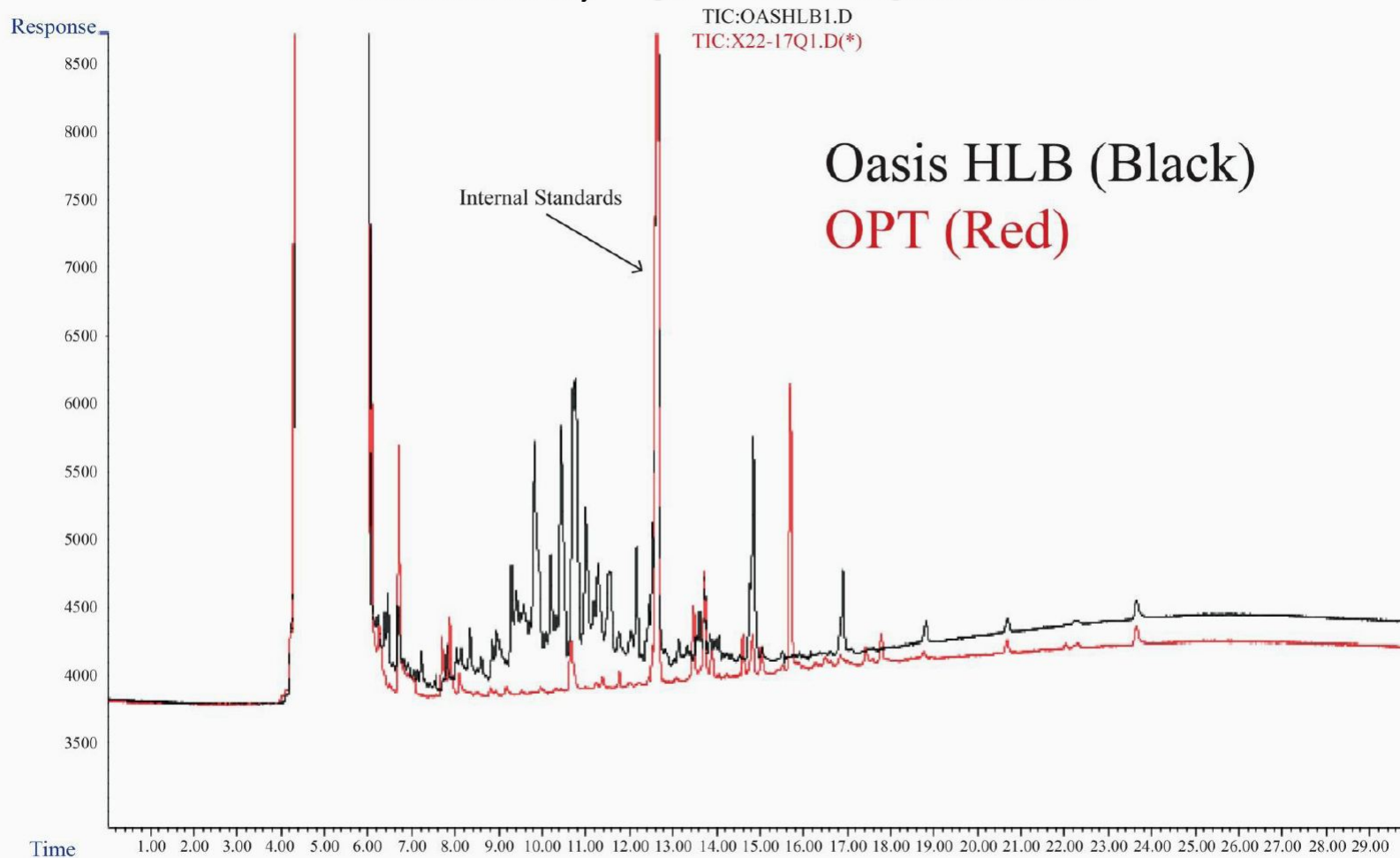

"I compared the SampliQ cartridges to Oasis HLB and Strata (from Phenomenex). Both the Strata and SampliQ performed better than OASIS for our purposes - which is estradiol and taleranol in bovine urine - and the SampliQ appears to give cleaner extracts than Strata. As always, one box wasn't quite enough, but I'm leaning towards the SampliQ for this method!" **Canadian Food Inspection Agency**




- Polymère sphérique 30 et 60 μm
- Stable au pH de 0 à 14
- Extraction de composés basiques & neutres
- Compatible tout types de matrices

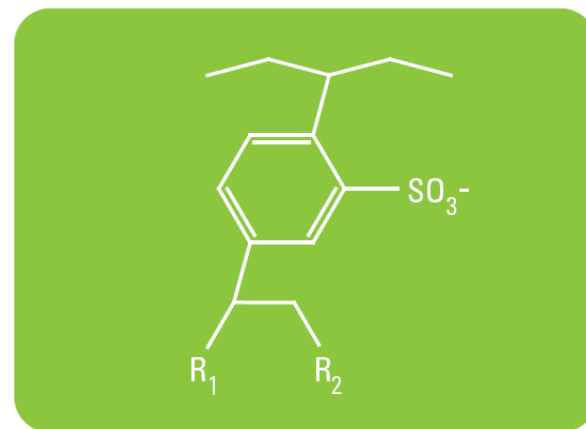


Sulfonic acid-modified divinyl
benzene polymer

**SampliQ pSCX
vs
Oasis MCX**

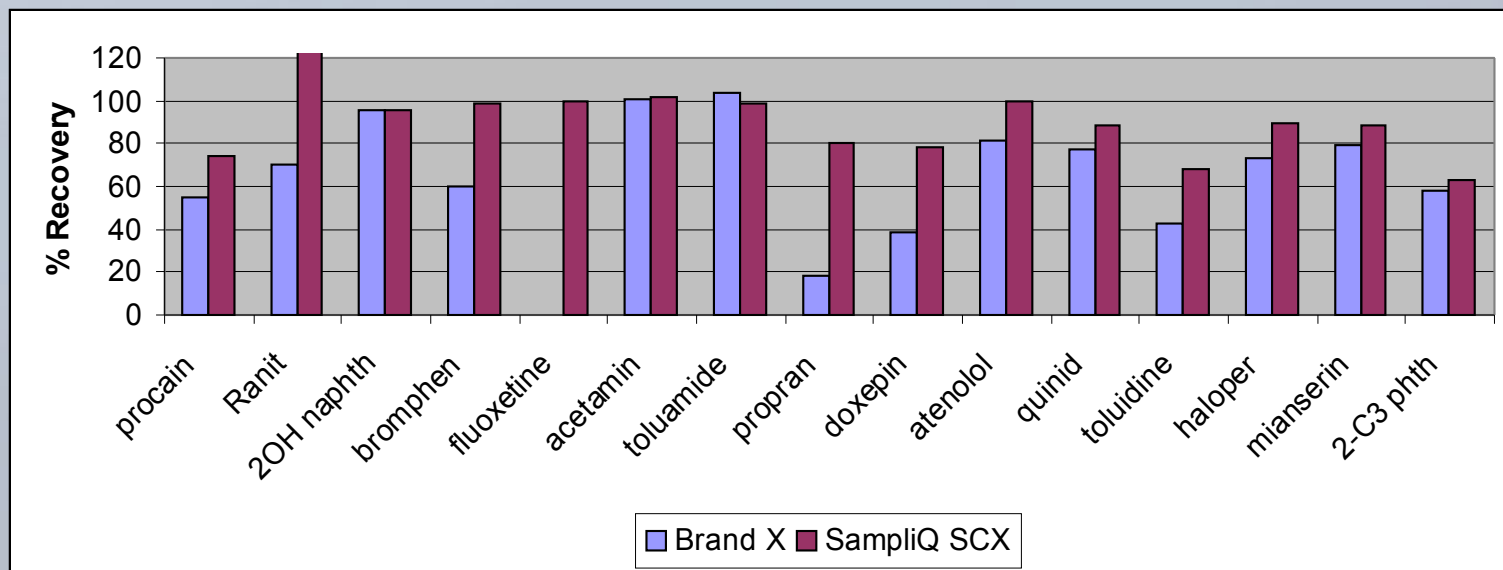




- Polymère sphérique 30 et 60 μm
- Stable au pH de 0 à 14
- Extraction de composés acides & neutres
- Compatible tout types de matrices

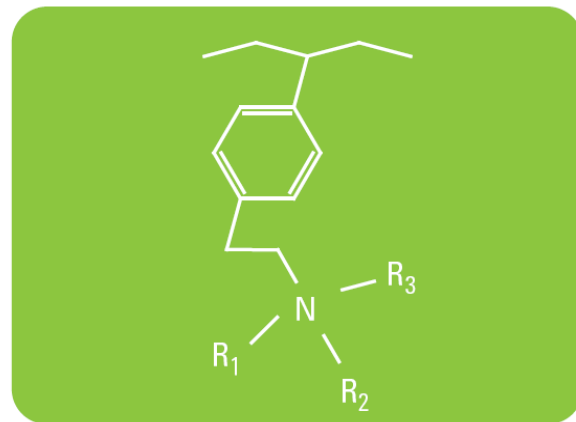


Tertiary amine-modified divinyl
benzene polymer

**SampliQ pSAX
vs
Oasis MAX**

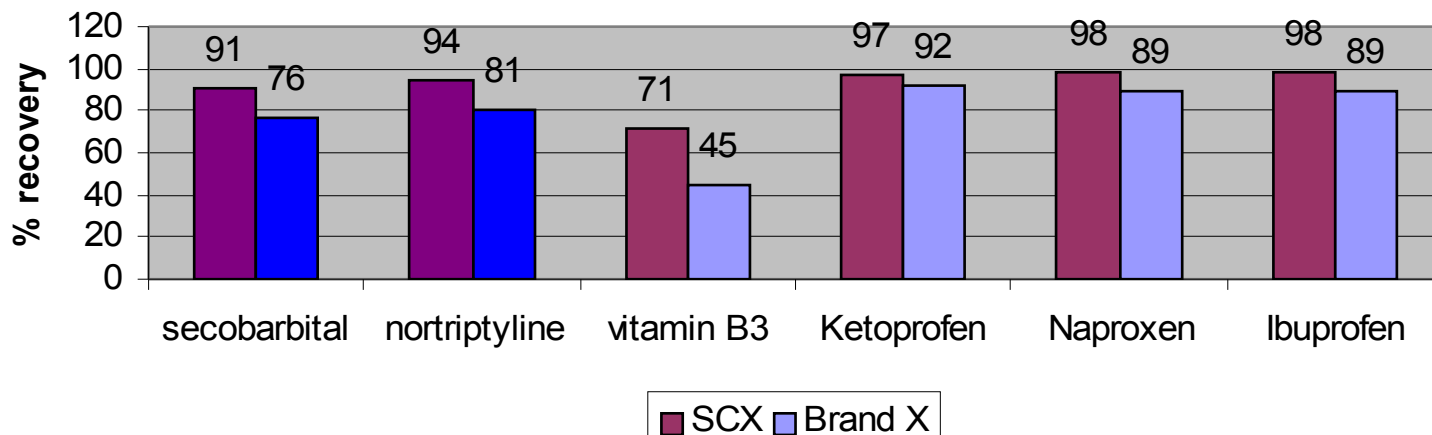






- Polymère sphérique 30 et 60 μm
- Stable au pH de 0 à 14
- Extraction de composés fortement basiques
- Compatible tout types de matrices

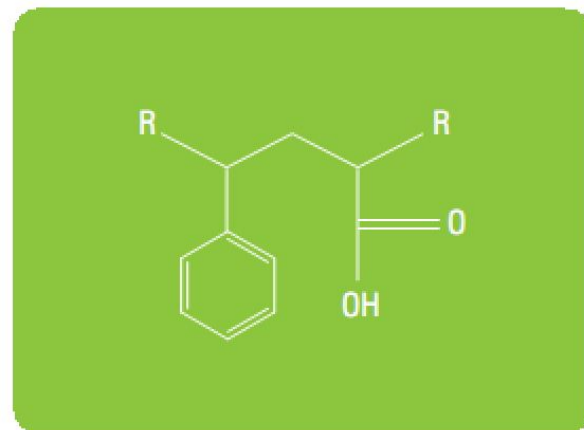

Carboxylic acid functionality
in hydrogen form

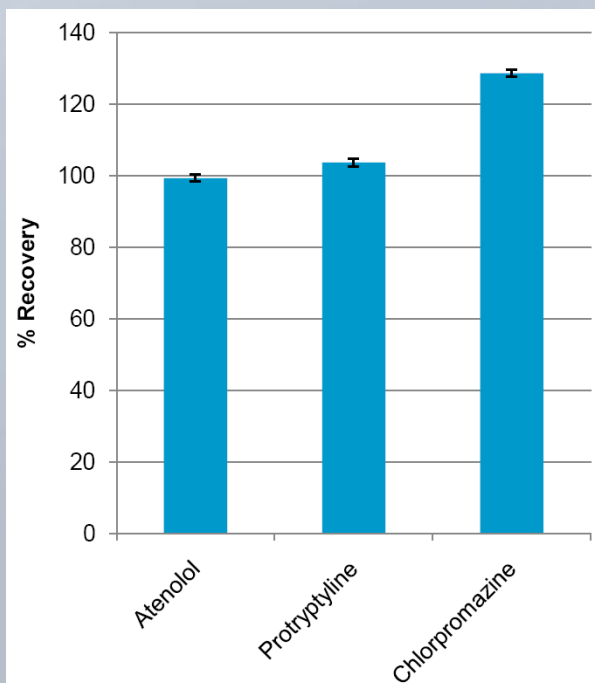


■ Recovery of Basic Drug from Human Plasma

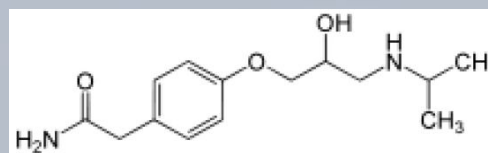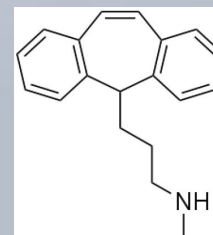




SampliQ-WCX[®] Generic Method Process for Strongly Basic/Cationic and Neutral Compounds

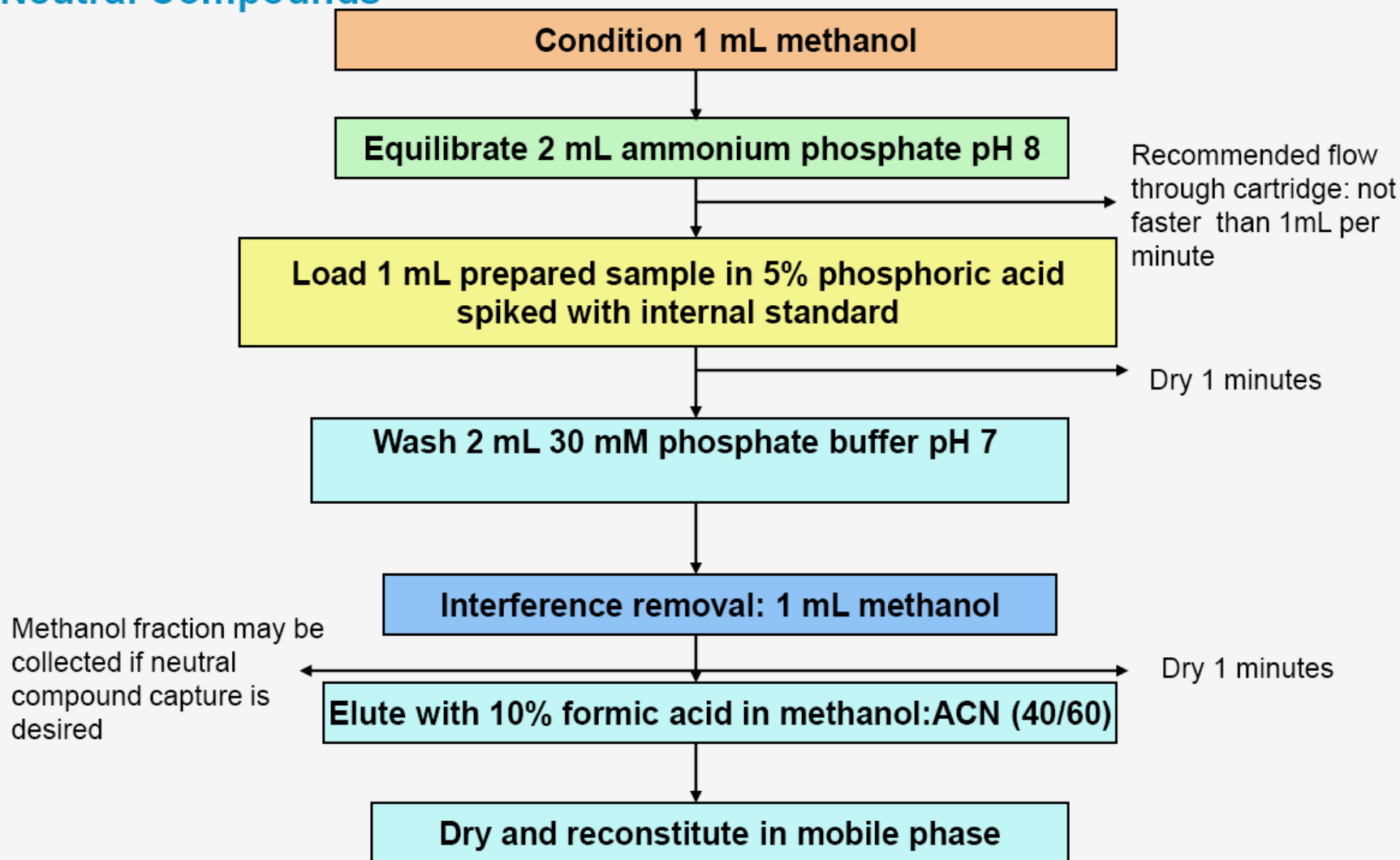










- Polymère sphérique 30 et 60 μm
- Stable au pH de 0 à 14
- Extraction de composés fortement acides
- Compatible tout types de matrices

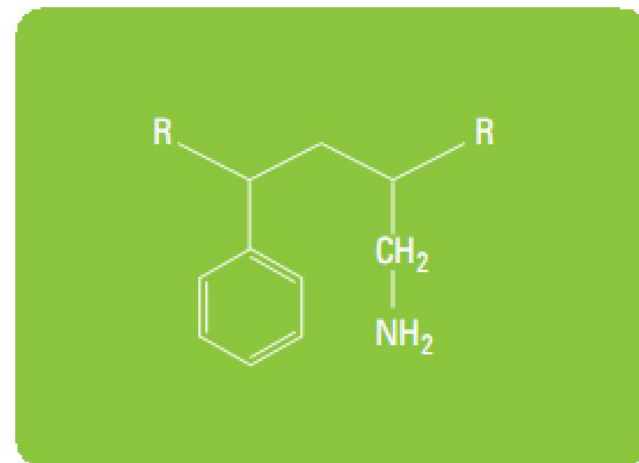

Neutral amine functionality

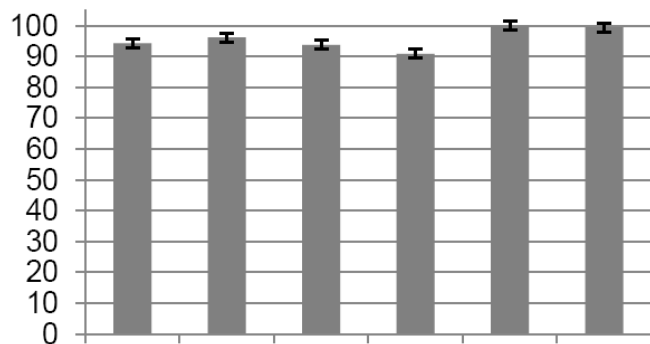


■ Acidic Compound Recovery from SampliQ WAX

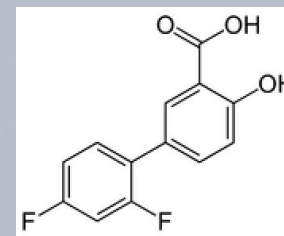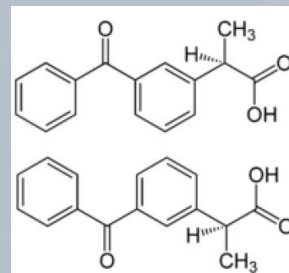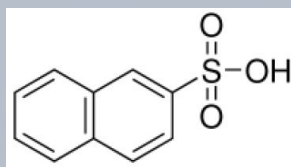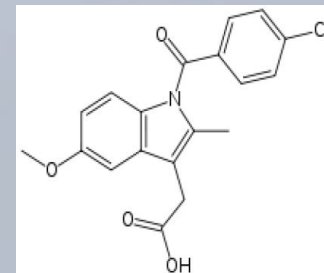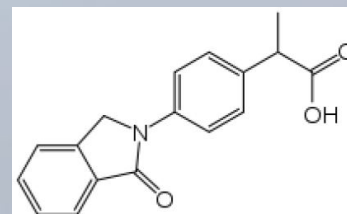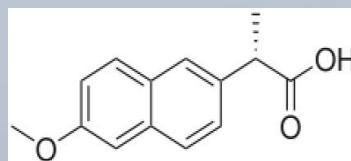




SampliQ WAX® Generic Method Process for Acidic/Anionic and Neutral Compounds

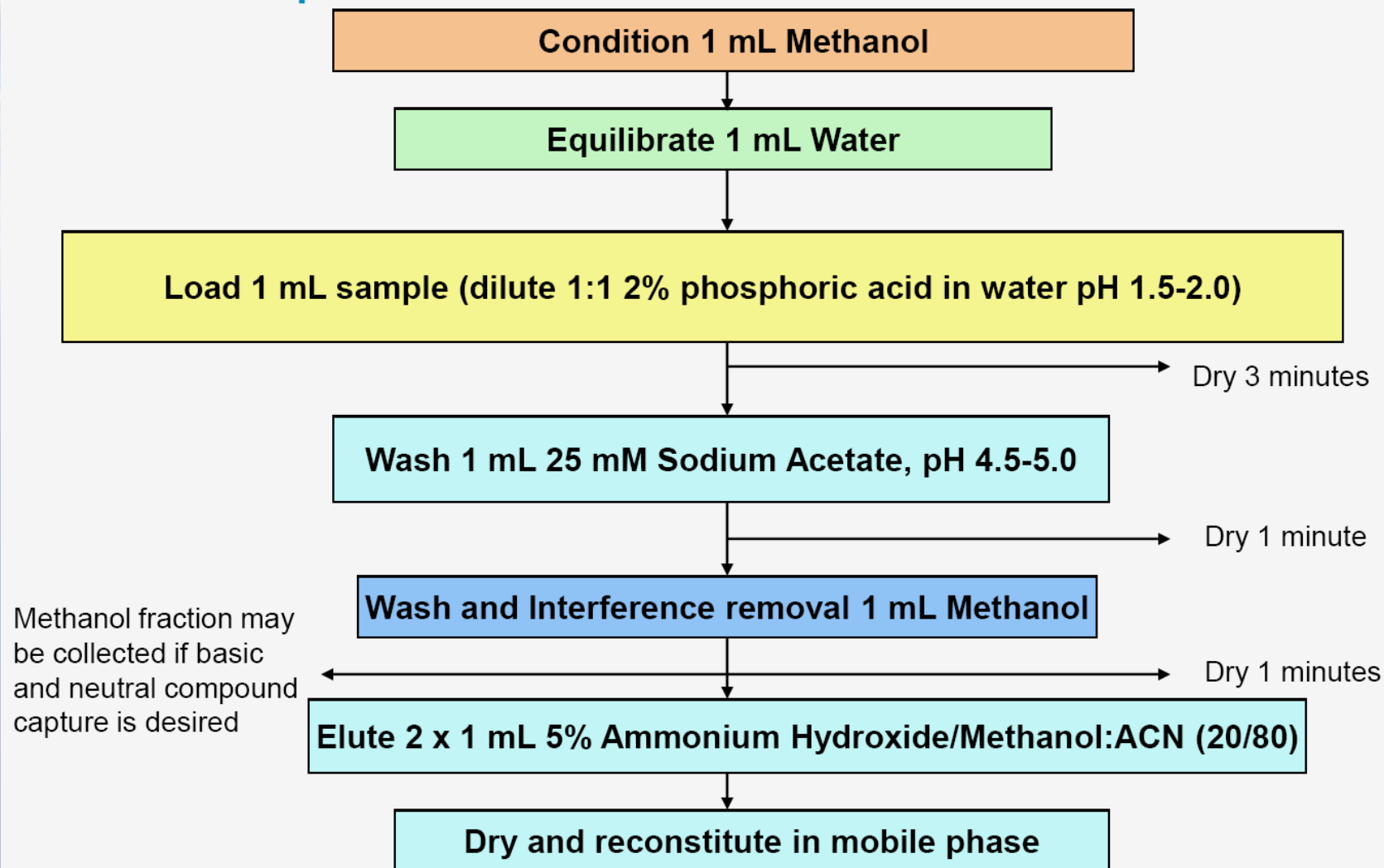



Agilent SampliQ Polymeric A/N/B Method

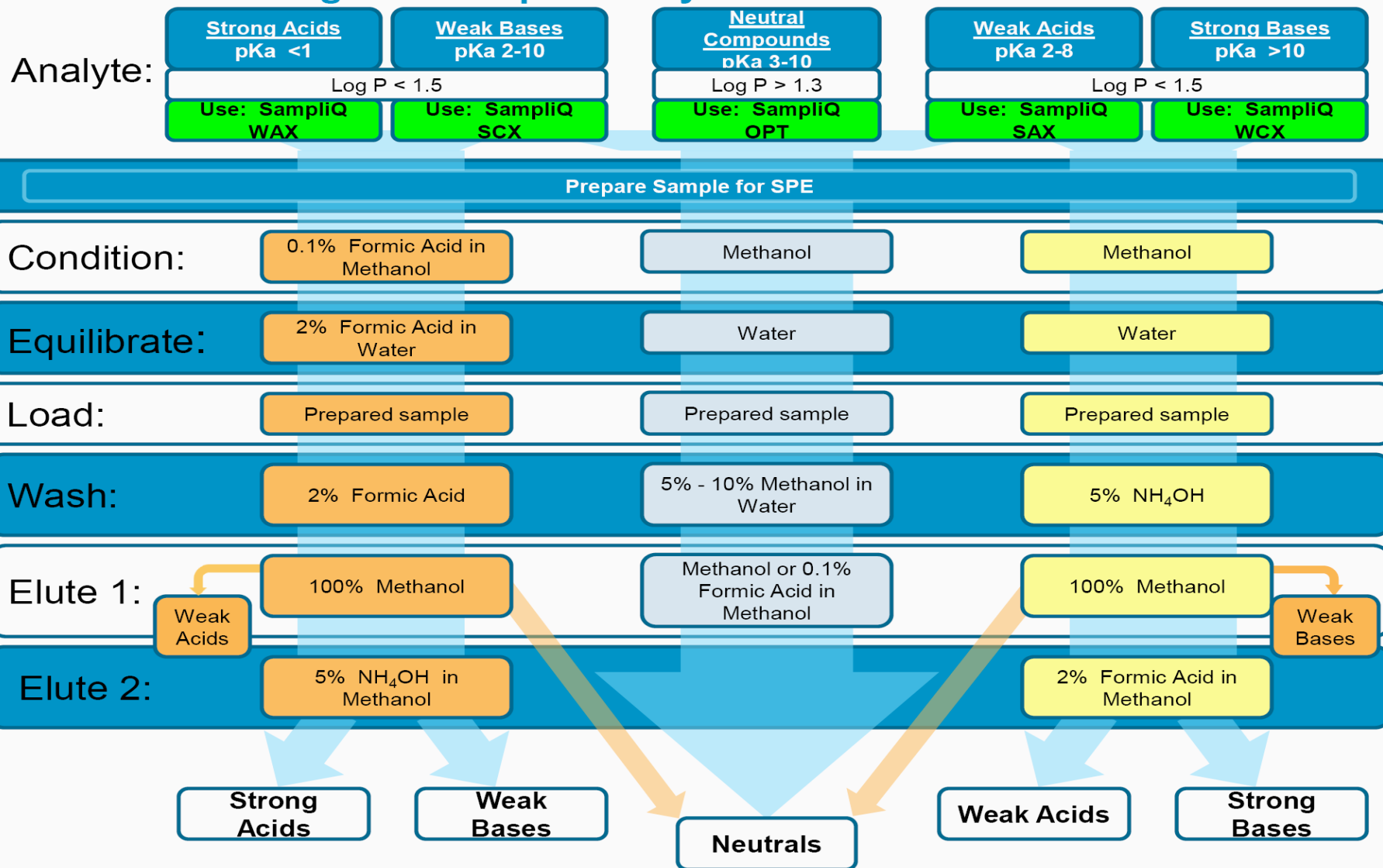



Agilent Technologies Références kits & plaque de développement

Plaque de développement 96 puits 1ml Polymère SampliQ Agilent

Référence : 5982-3796

Tarif : 253 euros HT/unité

SampliQ 30µm SAX				SampliQ 30µm SCX			SampliQ 30µm WAX			SampliQ 30µm WCX		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
a												
b												
c												
d												
e												
f												
g												
h												

Masse
10 mg

Kit de développement sur colonnes Polymère SampliQ Agilent 30mg/1ml

Kit pour l'extraction de composés acides & neutres

SampliQ 30µm SAX : 10 unités

SampliQ 30µm WAX : 10 unités

SampliQ 30µm OPT : 10 unités

Référence : 5982-3713

Tarif : 55 euros HT/3x10u

Kit pour l'extraction de composés basiques & neutres

SampliQ 30µm SCX : 10 unités

SampliQ 30µm WCX : 10 unités

SampliQ 30µm OPT : 10 unités

Référence : 5982-3813

Tarif : 55 euros HT/3x10u

SampliQ SAX : polymère DVB 30µm échangeur de cations fort pour l'extraction de composés basiques & neutres

SampliQ SCX : polymère DVB 30µm échangeur d'anions fort pour l'extraction de composés acides & neutres

SampliQ WAX : polymère DVB 30µm échangeur de cations faible pour l'extraction de composés fortement basiques

SampliQ WCX : polymère DVB 30µm échangeur d'anions fort pour l'extraction de composés fortement acides

SampliQ OPT : polymère modifié polyamide 30µm pour l'extraction de composés neutres & basiques



Masse/Vol. - Qté	SAMPLIQ			
	PS-DVB	Tarif HT	OPT 60µm	Tarif HT
500mg/6ml - 30/pk	5982-3465	145 EUR	5982-6065	172 EUR
1000mg/6ml - 30/pk	5982-3460	228 EUR	n.d.	n.d.

Masse/Vol. - Qté	SAMPLIQ 60µm										SAMPLIQ	
	OPT	Tarif HT	SCX	Tarif HT	SAX	Tarif HT	WCX	Tarif HT	WAX	Tarif HT	DVB	Tarif HT
30mg/1ml - 100/pk	5982-6013	133 EUR	5982-6213	165 EUR	5982-6313	168 EUR	5982-6513	253 EUR	5982-6613	253 EUR	5982-3113	133 EUR
60mg/3ml - 50/pk	5982-6036	95 EUR	5982-6236	100 EUR	5982-6336	100 EUR	5982-6536	113 EUR	5982-6636	113 EUR	5982-3136	95 EUR
150mg/6ml - 30/pk	5982-6067	119 EUR	5982-6267	126 EUR	5982-6367	153 EUR	5982-6567	140 EUR	5982-6667	140 EUR	5982-3167	119 EUR
Plaque 96 puits 30mg/2ml	5982-6096	241 EUR	5982-6296	241 EUR	5982-6396	241 EUR	5982-6596	257 EUR	5982-6696	257 EUR	n.d.	n.d.

	SAMPLIQ 30µm									
	OPT	Tarif HT	SCX	Tarif HT	SAX	Tarif HT	WCX	Tarif HT	WAX	Tarif HT
	5982-3013	133 EUR	5982-3213	165 EUR	5982-3313	168 EUR	5982-3513	253 EUR	5982-3613	253 EUR
	5982-3036	95 EUR	5982-3236	100 EUR	5982-3336	100 EUR	5982-3536	113 EUR	5982-3636	113 EUR
	5982-3067	119 EUR	5982-3267	126 EUR	5982-3367	153 EUR	5982-3567	140 EUR	5982-3667	140 EUR
1ml	5982-3096	236 EUR	55982-0026-SCX	241 EUR	55982-0026-SAX	241 EUR	55982-0026-WCX	241 EUR	55982-0026-WAX	241 EUR
2ml	5982-3097	241 EUR	5982-3296	241 EUR	5982-3396	241 EUR	5982-3596	257 EUR	5982-3696	257 EUR



Silica Reversed Phase (Non-Polar)										
Masse/Vol. - Qté	C18	Tarif HT	C18EC	Tarif HT	C8	Tarif HT	C2	Tarif HT	Si-Phenyl	Tarif HT
100mg/1ml - 100/pk	5982-1111	104 EUR	5982-1311	104 EUR	5982-1011	104 EUR	5982-1411	104 EUR	5982-1511	141 EUR
200mg/3ml - 50/pk	5982-1132	75 EUR	5982-1332	72 EUR	5982-1032	75 EUR	5982-1432	72 EUR	5982-1532	81 EUR
500mg/3ml - 50/pk	5982-1135	80 EUR	5982-1335	79 EUR	5982-1035	80 EUR	5982-1435	79 EUR	5982-1535	90 EUR
500mg/6ml - 30/pk	5982-1165	65 EUR	5982-1365	64 EUR	5982-1065	65 EUR	5982-1465	64 EUR	n.d.	n.d.
1000mg/6ml -30/pk	5982-1160	80 EUR	5982-1360	80 EUR	n.d.	n.d.	5982-1460	80 EUR	n.d.	n.d.

Silica Normal Phase (Polar)								Silica Mixed Mode				
Masse/Vol. - Qté	Silica	Tarif HT	Diol	Tarif HT	Cyano	Tarif HT	Amino	Tarif HT	Si-C8/SCX	Tarif HT	EVDX	Tarif HT
100mg/1ml - 100/pk	5982-2211	92 EUR	n.d.	n.d.	5982-1711	141 EUR	5982-1811	141 EUR	5982-1911	132 EUR	n.d.	n.d.
200mg/3ml - 50/pk	5982-2232	66 EUR	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5982-1832	83 EUR	5982-1932	83 EUR	5982-2332	91 EUR
500mg/3ml - 50/pk	5982-2235	75 EUR	5982-1635	95 EUR	n.d.	n.d.	5982-1835	95 EUR	5982-1935	109 EUR	n.d.	n.d.
500mg/6ml - 30/pk	5982-2265	58 EUR	n.d.	n.d.	5982-1765	80 EUR	5982-1865	80 EUR	5982-1965	68 EUR	5982-2364*	79 EUR
1000mg/6ml -30/pk	5982-2260	73 EUR	n.d.	n.d.	5982-1760	120 EUR	5982-1860	120 EUR	5982-1960	91 EUR	n.d.	n.d.

* 6ml/400mg

Silica Ion Exchange				Additional SampliQ Sorbents				Additional Sorbents	500mg/3ml 50/pk	Tarif HT	1000mg/6ml 30/pk	Tarif HT
Masse/Vol. - Qté	Si-SAX	Si-SCX	Tarif HT	Florisol	Tarif HT	Carbon	Tarif HT	Alumina Acid	5982-4035	76 EUR	5982-4060	70 EUR
100mg/1ml - 100/pk	5982-2011	5982-2111	141 EUR	n.d.	n.d.	5982-4411	170 EUR	Alumina Basic	5982-4135	76 EUR	5982-4160	70 EUR
200mg/3ml - 50/pk	5982-2032	5982-2132	83 EUR	5982-4332	58 EUR	5982-4432*	95 EUR	Alumina Neutral	5982-4235	76 EUR	5982-4260	70 EUR
500mg/3ml - 50/pk	5982-2035	5982-2135	109 EUR	5982-4335	79 EUR	n.d.	n.d.					
500mg/6ml - 30/pk	5982-2065	5982-2165	92 EUR	5982-4365	61 EUR	5982-4465	90 EUR					
1000mg/6ml -30/pk	5982-2060	5982-2060	108 EUR	5982-4360	70 EUR	n.d.	n.d.					

* 3ml/250mg